

WelchAllyn

# パンオプティック™ 検眼鏡

Axial Point Source 光学システム採用の検眼鏡

無散瞳状態の収縮した瞳孔でも、眼底を容易に観察することができます。

**ペーシェント・アイカップ**  
周辺光を遮断して観察に最適な状態が得られます。

**眩輝防止システム(特許)**  
眩輝や光反射による不要な干渉を除去します。

**ハロゲンHPXランプ**  
従来のハロゲンランプの光量を30%アップ(当社比)

**焦点調節ホイール**  
焦点範囲:-20~+20D

**アパーチャーダイヤル**  
・スポットサイズ(マイクロ、スモール、ラージ)  
・レッドフリーフィルター、スリットアパーチャー標準装備



**リチウムハンドル**

## Axial Point Source 光学技術(特許)

特許取得の技術により、無散瞳状態の瞳孔でも、観察視野角25°と従来の約5倍の観域が得られます。

より広い観察域

5倍



従来品



パンオプティック

【眼底観察範囲の比較】

【アパーチャー】

- ラージスポット**  
散瞳眼に使用する最も標準的なアパーチャー。
- スモールスポット**  
無散瞳眼に対し、容易に観察可能。通常このアパーチャーで観察。
- マイクロスポット**  
無散瞳の小瞳孔眼に使用。
- スリット**  
隆起性病変、乳頭浮腫の観察に使用。

【フィルター】

- レッドフリー**  
観察野から赤色を除去し、眼底血管の観察をより容易に。
- コバルトブルー(角膜観察用)**  
蛍光染色液を用いて、角膜の病変や損傷、異物を視認できる。

AU-11820S

パンオプティック 眼科スペシャリスト検眼鏡  
(リチウムハンドル アイカップ1個 + 角膜観察レンズ付)

キャンペーン特別価格

通常価格 ¥156,000 → **¥92,000**  
(税込 ¥99,360)

日本総代理店

**アールイーメディカル株式会社**  
R E MEDICAL, INC.

本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29 TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222  
 東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483  
 名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東 TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956  
 福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

www.re-medical.co.jp

夏の特別キャンペーンのお知らせ

**Keeler**  
英国 キーラー社  
ポータブルスリットランプ

キーラー  
ポータブルスリットランプ  
スペシャルキャンペーン

Summer 3 Campaign

トノペン AVIA  
下取りキャンペーン

**Reichert**  
TECHNOLOGIES  
米国 ライカート社  
トノペンAVIA

セール期間

2018. 5.21 月 ▶ 7.31 火

**アールイーメディカル株式会社**  
R E MEDICAL, INC.



# キーラー ポータブルスリットランプ スペシャルキャンペーン



# トノペン AVIA 下取りキャンペーン

## Keeler Portable Slit Lamp LED

光学機器製造で培った高度なノウハウを凝縮

### ● 精密加工のアルミニウム製本体

軽量で、耐性・強度に優れています。

### ● 据置型の性能を継承した手持タイプ


前房の炎症等を評価する際に用いる  
1mm×1mm角や  
LED固視灯を備えています。



LED固視灯

### ● 最新の光学技術による高品質画像 (倍率：10x, 16x)

多層コーティングレンズにより、  
優れた鮮明画像が得られます。

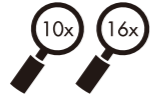

### ● 調整可能な照明レベル

LED 照明装置は、ダイヤルにより  
無段階に調整可能です。

### ● 電池の消費を抑えるオートオフ機能

2分30秒後に自動でオフになり、  
消し忘れや電池の消費を抑えます。

### ● スリット / フィルター

スリット ホイール						
フィルター ホイール						
	レッドフリー	コバルトブルー	中間濃度 0.8	無色		



キーラーポータブルスリットランプを  
お買い上げいただいた方に  
専用ケースプレゼント!!

3010-P-7000  
PSL キャリーケース

先着  
30  
名様



3010-P-2000  
キーラー  
ポータブルスリットランプ

キャンペーン特別価格

通常価格 ¥580,000 → **¥406,000**  
(税込 ¥438,480)

往診セットとして  
購入すると  
さらにおトク!!

セット価格

**¥750,000**  
(税込 ¥810,000)



AU-230650-S  
トノペン AVIA  
(ケース、ジェットブロー、  
オキュフィルム付)

キャンペーン特別価格

通常価格 ¥680,000 → **¥450,000**  
(税込 ¥486,000)



Applanation Tonometer

## TONO-PEN AVIA

トノペンAVIAは扱いやすい手持ち眼圧計です。  
眼圧測定値はゴールドマン眼圧計と高い相関を示しています。  
軽量で人間工学に基づくデザインを採用し、搭載する最新の電子測定技術により、  
迅速かつ正確な眼圧測定を行うことができます。  
電源にはトノペンAVIA用長寿命バッテリーバックを内蔵し、2,500回以上の測定に対応します。  
トノペンXLと同様、オキュフィルム(チップカバー)を装着することで、  
患者に対する相互感染が防止できます。

- キャリブレーション不要
- 高感度、高性能センサー搭載
- 従来のトノペンのオキュフィルム(チップカバー)が流用可能



LED  
測定モード時、  
緑色に点灯します。

電源バッテリーバック

操作ボタン

トランスデューサー

チップ

LCDディスプレイ

mmHg単位の眼圧、測定回数、  
統計的信頼性指標、  
バッテリー残量を表示します。

### 下取り対象製品

- トノペン 2
- トノペン XL

※他社製手持ち眼圧計の場合は、  
弊社営業担当までご相談ください  
※故障品(動作不良品)も下取りいたします。