

Keeler

英国 キーラー社

スリットランプ 40Z

Keeler
100
years



Z Series Slit Lamp

日本総代理店

 **アールイーメディカル株式会社**
R E MEDICAL, INC.

本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社1-1204 ロール社東
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

▶本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

www.re-medical.co.jp

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

 **アールイーメディカル株式会社**
R E MEDICAL, INC.

細部の性能と優れた操作性が上質なデザインと融合

背景照明

① LED背景照明
NIM-LED-KZ
LED 背景照明 (ZEISSタイプ)
ホワイト/ブルー切替可能

スリット光とは別光源のため、スリット光の調整に影響無く背景照明光の調整が可能です。



② keelerLED背景照明
3020-P-7087-S
keelerLED 背景照明セット (ZEISSタイプ)



アプラインーション

2414-P-2010
キーラー
デジタル アプラインーション
トノメーター (Z) タイプ



カメラシステム


① デジタルカメラ
DCS-K
キーラー スリット用デジタルカメラシステム
(専用ビームスプリッター、カメラマウント付属)



② CCDカメラ
THD-23FHD
イケガミCCDカメラシステム
(5mケーブル付)
KBS50
ビームスプリッター
(IN/OUT機能付)
SD-033
Cマウント手動絞リアダプター

スライディング接続ケーブル

Z0261-S
キーラー 接続キットセット
(スリットランプ用)

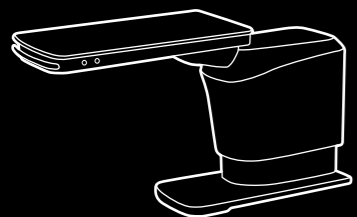

スライド式光学台



歴史が証明する高度な光学設計技術

キーラーは今日まで数々の眼科用医療光学機器を世に送り出してきました。光学設計と製造に 100 年の伝統を持つキーラーの自信作です。




利便性の高いフィルターを標準装備

フィルターホイール内に減光、レッドフリー、コバルトブルー、顕微鏡部にドロッピンイエローフィルター、プリズム部に跳ね上げタイプのディフューザーが標準装備されています。

アパーチャー	0.2	1	2	3	5	9	14
フィルターホイール	無色	ND 減光	レッドフリー	コバルトブルー			

■倍率 (5段階)

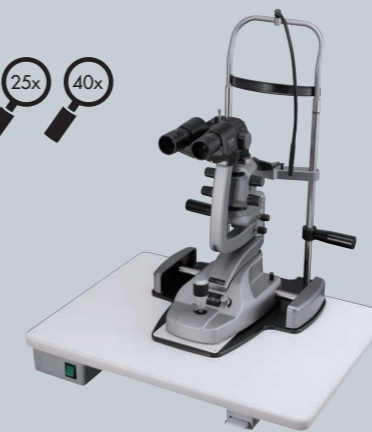

カタログ番号	商品名
3020-P-2084	キーラー スリットランプ 40Z (LED)

※光学台は別売りです



長寿命・低消費電力のLED照明

LEDは3,800Kの色温度。青色のレベルをわずかにあげているので、蛍光観察時に有効です。また、寿命は10,000時間以上で、長期間交換の必要がありません。



操作性向上のための配慮

照明光の調光ノブをジョイスティックに近接配置しました。調光における操作性が向上しました。

■製品仕様

光学部	ガリレオ式双光学系、ドラム回転式倍率
倍率	6×, 10×, 16×, 25×, 40×
接眼レンズ	12.5×
視野径	34mm, 22mm, 14mm, 8.5mm, 5.5mm
眼幅調節	49mm~77mm
視路角	13°
作動距離	107mm
スリット長/幅	0.2mm ~ 14mm / 0mm ~ 14mm 連続可変
スリット径	0.2mm, 1mm 正方形, 2mm, 3mm, 5mm, 9mm, 14mm
フィルター	クリア, 減光, レッドフリー, コバルトブルー, イエロー, ディフューザー
スリット角度	360°
スリット回転	参照スケール付
ベース可動範囲	Z軸 25mm, X軸 107mm, Y軸 110mm
垂直調節	12mm
顕微鏡高さ調節	75mm
顕微鏡寸法	750mm×540mm×450mm
重量	5.2kg
電源	AC100V(±10%)
固視灯	赤色LED
照明用電球	LED

届出番号:27B1X00001KZSL01