

# TONO-PEN AVIA

Applanation Tonometer

トノペン AVIA



# 新たに Quick-Tap™ モード搭載!



従来のトノペンAVIAで必要だったおよそ10回の測定が Quick-Tap™モード搭載のトノペンAVIAでは、より少ない測定回数で高精度な眼圧値測定を行うことが可能になりました。また、LEDの色により、眼圧測定値の信頼性を分かりやすくお知らせします。

Quick-Tap™搭載トノペンAVIAは、従来のトノペンAVIAモード(第1ジェネレーション)と Quick-Tap™モード(第2ジェネレーション)の切替えも可能です。



## Quick-Tap™ モード

### ●少ない測定回数


わずか1回の測定でも眼圧値を液晶に表示します。(信頼性指標は表示されません) また、信頼性の高い測定値を得る為に、数回の追加測定を行うことも可能です。

### ●測定毎に眼圧測定値の表示

従来のモードでは約10回の測定後にしか表示されなかった眼圧測定値が、Quick-Tap™モードでは測定毎に表示されるようになりました。

### ●眼圧測定値の信頼性をLEDでお知らせ

Quick-Tap™モードで数回の測定を行い、LEDが黄色から緑色に変わると、信頼性の高い眼圧測定値を得られた事をお知らせします。また、検査の終了を音でお知らせします。

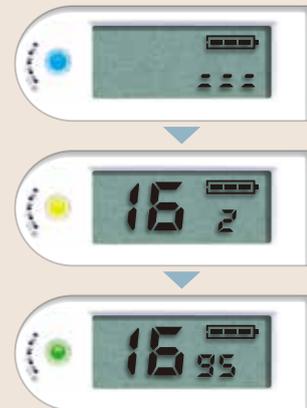

#### ■カタログ番号

AU-230650Q-S	トノペンAVIA(ケース、ジェットブロー、オキユフィルム付)
<別売品>	
AU-S-0336-D	ジェットブロー
AU-230651	オキユフィルム 150個/箱
AU-230577	バッテリーパック(トノペンAVIA用)

※仕様は予告なく変更されることがあります。

#### ■仕様

寸法	160mm×44mm×20mm
重量	71g
トランスデューサー	マイクロストレンゲージ
測定範囲	5～55mmHg
電源	専用バッテリー(DC6V)

日本総代理店

**RE** アールイーメディカル株式会社  
R E MEDICAL, INC.

本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29  
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル  
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社1-1204 ロール社東  
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

[www.re-medical.co.jp](http://www.re-medical.co.jp)

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222  
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483  
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956  
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181