


PNEUMATONOMETER MODEL 30 CLASSIC™




- 圧平式による無侵襲な眼圧測定装置です。
- IOPの実時間移動平均と標準偏差を約3秒で正確に読み終え、トーン信号で知らせます。


Tonometry Manual Print Out

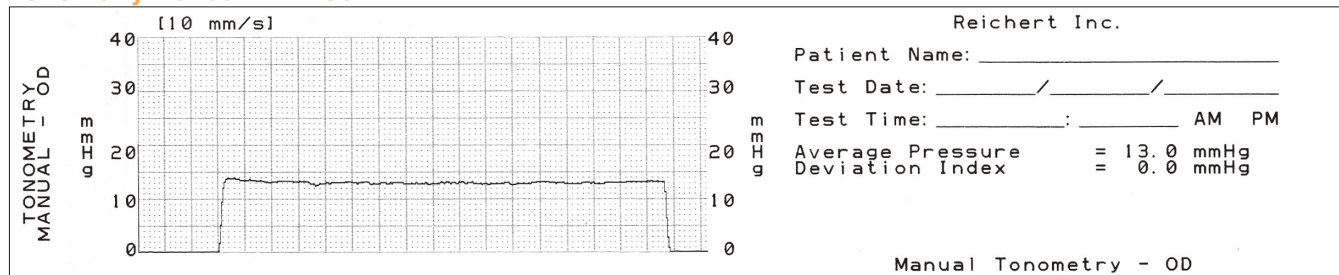

Tonometry Pulse Print Out

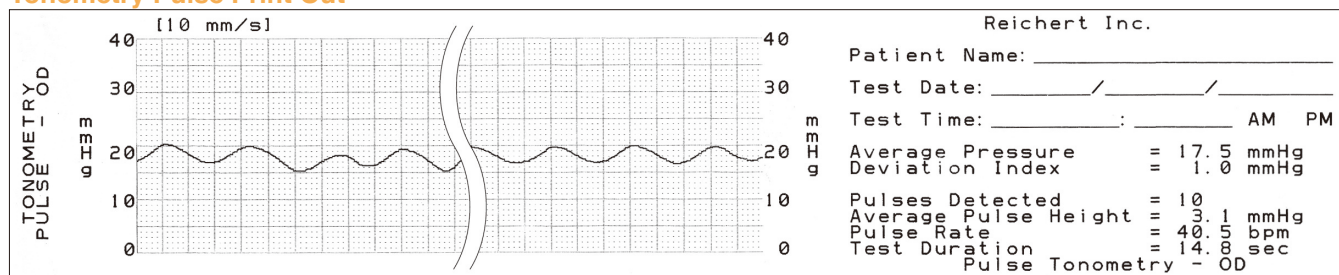

Tonography Print Out

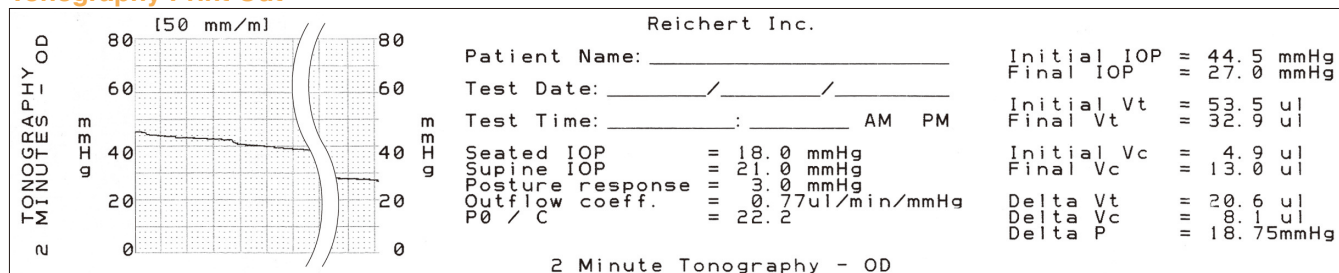

AU-23-2352 ニューマトノメーター モデル30クラシック

構成内容

- コンソール
- プローブ
- フットスイッチ
- 重り(10g)
- 記録紙1巻
- チップ&メンブレン
- ウォーターバリアファイアー

◀ ウォーターバリアファイアー

◀ フットスイッチ

▼ チップ&メンブレン

別売品

AU-23-0676	チップ&メンブレン(1ヶ入)
AU-23-0677	チップ&メンブレン(3ヶ入)
AU-23-2348D	記録紙(1巻)
AU-23-6995	重り(10g)
AU-23-2345	フットスイッチ
AU-23-2349	プローブ

仕様

表示方法	液晶ディスプレイ
質量	4.54kg
外形寸法	(W)356mm×(H)133mm×(D)267mm
電源電圧	100V A.C. 1.5A 50/60Hz
プローブ	圧平式
プローブ感度	0~80mmHg
眼圧測定レンジ	5~80mmHg
チャートレコーダ	眼圧測定:0~40mmHg / トノグラフィ:0~80mmHg
エアポンプ	14PSI(寿命約3,000時間)

日本総代理店

RE アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本社: 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所: 〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所: 〒465-0092 愛知県名古屋市中東区社台2-128 バディーナ社台
福岡営業所: 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

TEL.(06)4794-8220(代) FAX.(06)4794-8222
TEL.(03)5816-1480(代) FAX.(03)5816-1483
TEL.(052)760-3955(代) FAX.(052)760-3956
TEL.(092)437-5180(代) FAX.(092)437-5181

www.re-medical.co.jp

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

CAT RC-3 改5 2010.5.1000AV