



# Keeler

英国 キーラー社

スリットランプ 40H


## Beautifully Crafted Slit Lamp



アールイーメディカル株式会社  
R E MEDICAL, INC.

届出番号:27B1X00001KDSL01

# Keeler

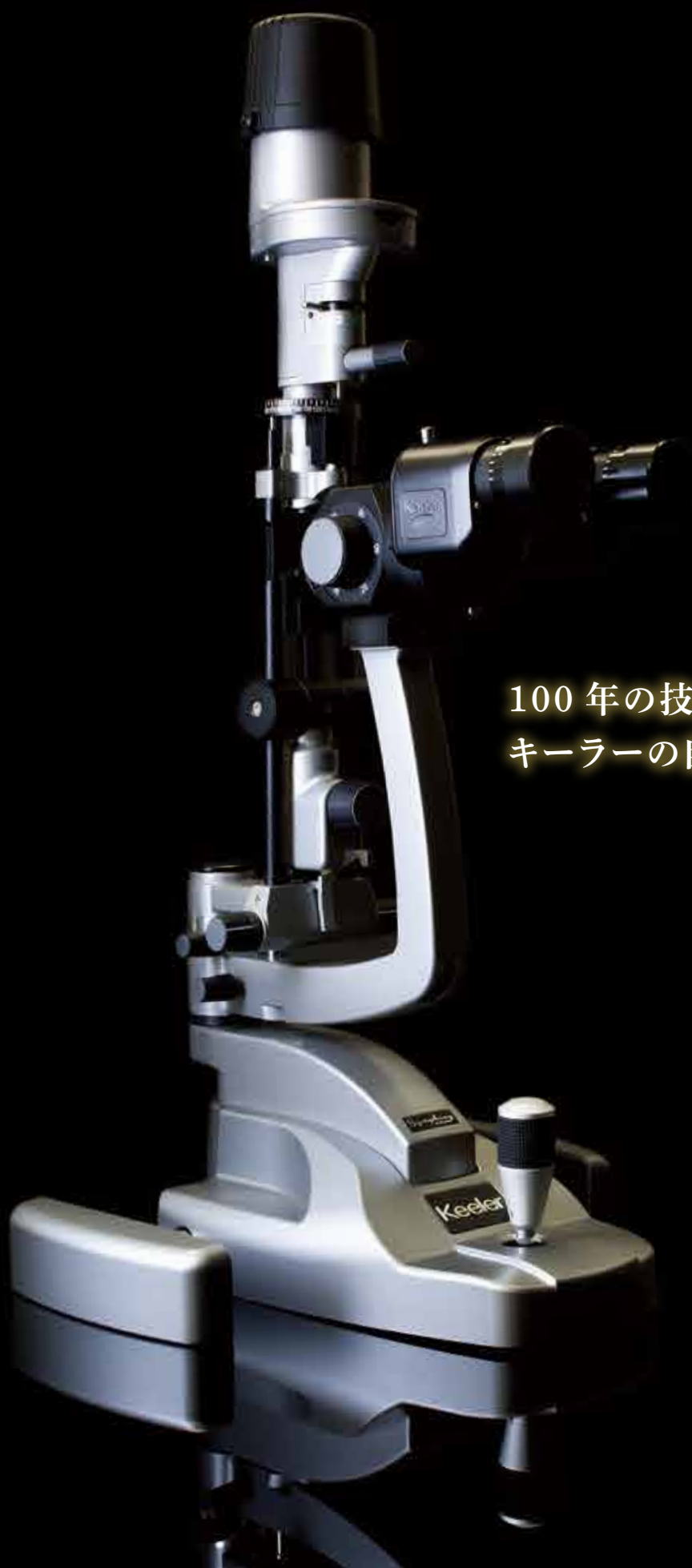

100年の技術と伝統が生んだ  
キーラーの自信作

# 細部の性能と優れた操作性が上質なデザインと融合



## 歴史が証明する高度な光学設計技術

キーラーは今日まで数々の眼科用医療光学機器を世に送り出してきました。光学設計と製造に100年の伝統を持つキーラーの自信作です。



## 長寿命・低消費電力のLED照明

LEDは3,800Kの色温度。青色のレベルをわずかにあげているので、蛍光観察時に有効です。また、寿命は10,000時間以上で、長期間交換の必要がありません。




## 利便性の高いフィルターを標準装備

キーラーのスリットランプではイエローフィルターとディフューザーが標準装備されています。イエローフィルターは顕微鏡部にドロップインするだけ、ディフューザーはフィルター・ホイール内に装備されています。

アパーチャー							
	0.2	1	2	3	5	9	12
フィルターホイール							
	無色	減光	レッドフリー	ディフューザー	コバルトブルー		

### ■倍率(5段階)

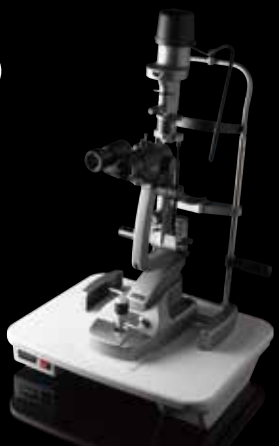

カタログ番号	商品名
3020-P-2081	キーラー スリットランプ 40H (LED)

※光学台は別売りです



## 操作性向上のための配慮

照明光の調光ノブをジョイスティックに近接配置しました。調光における操作性が向上しました。

### ■製品仕様

光 学 部	ガリレオ式双眼光学系、ドラム回転式倍率
倍 率	6×, 10×, 16×, 25×, 40×
接 眼 レ ン ズ	12.5×
視 野 径	34mm, 22mm, 14mm, 8.5mm, 5.5mm
眼 幅 調 節	49mm~77mm
視 路 角	13°
作 動 距 離	107mm
スリット長/幅	1mm ~ 12mm 連続可変 / 0mm ~ 12mm 連続可変
スリット径	0.2mm, 1mm 正方形, 2mm, 3mm, 5mm, 9mm, 12mm
フ ィ ル タ ー	クリア, レッドフリー, 減光, ディフューザー, コバルトブルー
スリット角度	±90°連続
スリット回転	±180°参照スケール付
スリット傾斜角度	0°, 5°, 10°, 15°, 20°
ベース可動範囲	Z軸 25mm, X軸 107mm, Y軸 110mm
水 平 調 節	12mm
顎台高さ調節	75mm
顕微鏡寸法	750mm×540mm×450mm
重 量	5.2kg
電 源	AC100V(±10%)
固 視 灯	LED
照 明 用 電 球	LED

# Keeler

日本総代理店



**アールイーメディカル株式会社**

R E MEDICAL, INC.

本社 : 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29  
東京営業所 : 〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル  
名古屋営業所 : 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東  
福岡営業所 : 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222  
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483  
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956  
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

[www.re-medical.co.jp](http://www.re-medical.co.jp)

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。