

ASICO

アシコ社製品
特別キャンペーンのご案内



日頃のご愛顧に感謝して
本パンフレット掲載商品を特別価格にてご提供いたします

セール
期間
2023

9.20 水 ▶ 12.8 金



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

サイドポート用CCC鑷子

大好評の
サイドポート用CCC鑷子です



AE-4402S 池田氏 のぞみCCC鑷子 ショートタイプ 23G



AE-4402 池田氏 のぞみCCC鑷子 23G



AE-4402S



0.6mm

ショートタイプ 全長 115mm、シャフト長 17mm

レギュラータイプ 全長 140mm、シャフト長 24mm

※先端部がよりシャープになり、器具の出し入れがしやすくなりました。

※より視認性の高い先端形状になっています。

※ショートタイプは、日本人の手にフィットし、操作性を向上させるため、通常よりハンドル部を18mm、シャフト部を7mm短くしました。

通常価格 (税込)
各¥280,000 (¥308,000)
セール期間内特別価格 (税込)
各¥187,600 (¥206,360)



AE-4385S 池田氏 スーパーマイクロCCC鑷子 ショートタイプ 23G



AE-4385 池田氏 スーパーマイクロCCC鑷子 23G



AE-4385S



0.6mm

ショートタイプ 全長 115mm、シャフト長 17mm

レギュラータイプ 全長 140mm、シャフト長 24mm

※先端チップは非常にシャープで、チップにアングルが付いており、視認性を高めています。

※ショートタイプは、日本人の手にフィットし、操作性を向上させるため、通常よりハンドル部を18mm、シャフト部を7mm短くしました。

通常価格 (税込)
各¥280,000 (¥308,000)
セール期間内特別価格 (税込)
各¥187,600 (¥206,360)



AE-4406 河合氏 CCC鑷子 ショートタイプ 27G



0.4mm

ショートタイプ 27G、全長 115mm、シャフト長 15.5mm

※先端チップ内側にセレーションを有しており、把持能力を高めています。

※チップシャフトにはサンドブラスト加工が施されており、顕微鏡からの反射を防止しています。

通常価格 (税込)
¥300,000 (¥330,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥201,000 (¥221,100)



AE-4404 河合氏 CCC鑷子 ショートタイプ 25G



0.5mm

ショートタイプ 25G、全長 115mm、シャフト長 17mm

※先端チップ内側にセレーションを有しており、把持能力を高めています。

※チップシャフトにはサンドブラスト加工が施されており、顕微鏡からの反射を防止しています。

通常価格 (税込)
¥300,000 (¥330,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥201,000 (¥221,100)



虹彩剪刀&前囊剪刀

細いシャフトと小さいチップ先で
眼内での操作性を向上させた
25G 虹彩剪刀と前囊剪刀です

虹彩剪刀

1

売れ筋

AE-5662 八重氏 虹彩剪刀 25G



- 25G、全長 115mm、シャフト長 17mm
- ※25Gシャフトを採用することで眼内での操作性が大幅に改善されました。
- ※散瞳不良時の虹彩切開に最適です。
- ※虹彩だけでなくCCC作製時の前囊の処理にも便利なツールです。
- ※垂直方向の刃により、スムーズな操作が可能です



通常価格 (税込)
¥308,000 (¥338,800)
セール期間内特別価格 (税込)
¥206,360 (¥226,996)

2

売れ筋

AE-5663 河合氏 虹彩剪刀 25G



- 25G、全長 115mm、シャフト長 17mm
- ※散瞳不良時の虹彩切開に最適です。
- ※25Gシャフトと水平方向の刃により、1ポートからの切開範囲が広がりました。
- ※25Gシャフトを採用することで、サイドポートからの挿入や眼内での操作性が大幅に改善しました。



通常価格 (税込)
¥308,000 (¥338,800)
セール期間内特別価格 (税込)
¥206,360 (¥226,996)

前囊剪刀

3

売れ筋

AE-5619 秦氏 前囊カーブ剪刀 25G



- 25G、全長 118mm、シャフト長 15mm
- ※チップが強弯になっており、CCCが流れた際の軌道修正時に最適です。
- ※シャフトがストレートなので、左右両方向への切開が容易です。
- ※虹彩切開時にも使用できます。



通常価格 (税込)
¥320,000 (¥352,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥214,400 (¥235,840)

洗浄器

サイドポート用器具を長くお使いいただくために……

T-KN0030 マイクロシャフト手術器具洗浄器



- 全長 160mm
- ※シャフト内の汚れを確実に洗浄します。
- ※シャフトがキャップ部に納まりますので安全に洗浄できます。



通常価格 (税込)
¥28,000 (¥30,800)
セール期間内特別価格 (税込)
¥18,760 (¥20,636)

AE-1059 三好氏 調節式開瞼器 TypeII

■全長94mm、ブレード幅12mm
小眼瞼用


※1014Nの固定力を上げるためにブレード部分を深くしました。



通常価格 (税込)
¥50,000 (¥55,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥33,500 (¥36,850)



AE-1009 小早川氏 調節式開瞼器

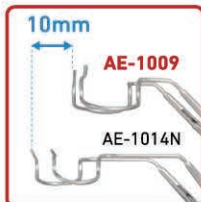

小眼瞼用開瞼器 (AE-1014N) との比較

■全長73mm、ブレード幅14mm

※全長を短く、適度な弯曲をもたせることで耳側へのズレを防ぎます。
※スタンダードサイズの開瞼器です。




通常価格 (税込)
¥48,000 (¥52,800)
セール期間内特別価格 (税込)
¥32,160 (¥35,376)

AE-1014N 三好氏 調節式開瞼器

■全長60mm、ブレード幅12mm
小眼瞼用

※瞼裂の狭い患者さんに最適です。

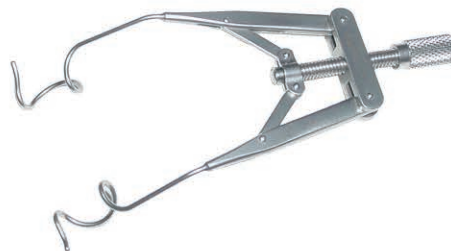

通常価格 (税込)
¥48,000 (¥52,800)
セール期間内特別価格 (税込)
¥32,160 (¥35,376)

AE-1014AN 三好氏 調節式開瞼器 吸引孔付



■全長82mm、ブレード幅12mm
小眼瞼用

※スリット状の吸引孔です。
※瞼裂の狭い患者さんに最適です。



通常価格 (税込)
¥120,000 (¥132,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥80,400 (¥88,440)

開瞼器

それぞれの状況に対応できる
おすすめの開瞼器です



3
売れ筋

AE-1009AN 小早川氏 調節式開瞼器 吸引孔付



■全長73mm、ブレード幅14mm

※AE-1009の吸引孔付タイプが発売されました。
※全長を短く、適度な弯曲をもたせることで耳側へのズレを防ぎます。
※スタンダードサイズの開瞼器です。



通常価格 (税込)
¥120,000 (¥132,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥80,400 (¥88,440)

AE-1058AN 秦/三好氏 調節式開瞼器 吸引孔付II



■全長78mm、ブレード幅12mm

小眼瞼用

※AE-1051ANのブレードの外側にも吸引口を設けました。



通常価格 (税込)
¥130,000 (¥143,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥87,100 (¥95,810)



1
売れ筋

AE-1051AN 秦/三好氏 調節式開瞼器 吸引孔付



■全長80mm、ブレード幅12mm

小眼瞼用

※ポートの位置を工夫しているため、結膜を吸い付けることなく、スムーズな吸引が可能です。



通常価格 (税込)
¥130,000 (¥143,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥87,100 (¥95,810)

ICL手術器具

近年急速に普及しつつあるICL
好評のアシコ器具を
ぜひお試しください

AE-2426 北澤氏 ICLマニピュレーター



■全長110mm




※眼内でICLをマニピュレートし易くするために、裏面にサンドブラスト加工をしています。

通常価格(税込)
¥77,000(¥84,700)
セール期間内特別価格(税込)
¥51,590(¥56,749)

AE-2423 市川氏 ダブルエンドICLマニピュレーター



■全長133mm

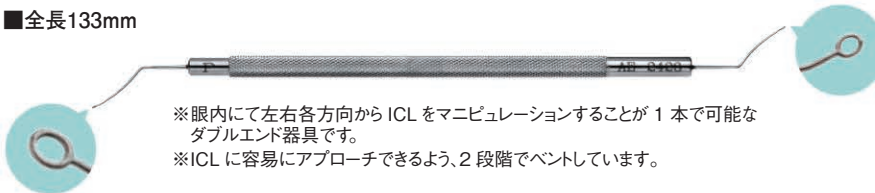

※眼内にて左右各方向からICLをマニピュレーションすることが1本で可能なダブルエンド器具です。
※ICLに容易にアプローチできるよう、2段階でベントしています。

通常価格(税込)
¥98,000(¥107,800)
セール期間内特別価格(税込)
¥65,660(¥72,226)

AE-2531RE ブーキッヒ氏 ICLマニピュレーター



■全長110mm、シャフト長8mm



※ICLのマニピュレーションに使用します。

通常価格(税込)
¥66,000(¥72,600)
セール期間内特別価格(税込)
¥44,220(¥48,642)

AE-4224 ブーキッヒ氏 ICL鑷子



■全長135mm、先端長18mm、先端幅0.4mm



※全長18mmのチップでカートリッジ内でのICLの正確な位置調整を行うのに最適です。

通常価格(税込)
¥120,000(¥132,000)
セール期間内特別価格(税込)
¥80,400(¥88,440)

AE-4446 ギルディバー/クラップ氏 ICLパックマン鑷子 改良型



■全長149mm、先端長4.5mm、先端幅1.55mm



※ICLを傷つけることなくカートリッジ内に装填できます。

通常価格(税込)
¥308,000(¥338,800)
セール期間内特別価格(税込)
¥206,360(¥226,996)

AE-4447 中村氏 ICLローディング/リムーバル鑷子



■全長149mm、先端長4.5mm、先端幅1.55mm



※ICLをカートリッジへ装填するだけでなく、眼内からICLを摘出する際にも使用しやすくなっています。

通常価格(税込)
¥308,000(¥338,800)
セール期間内特別価格(税込)
¥206,360(¥226,996)

CCC鑷子

定番のクロスアクションCCCがさらに高機能になりました。

クロスアクションCCC鑷子




- 全長 120mm
- ※軽量なチタン製の鑷子です。
- ※フラットとラウンドの2つのハンドルタイプがあります。
- ※2.2mmの切開創に対応しています。
- ※前囊をしっかりと把持できる先端デザインです。



AE-4408 稲村氏 CCC鑷子フラットハンドル

AE-4408R 稲村氏 CCC鑷子ラウンドハンドル

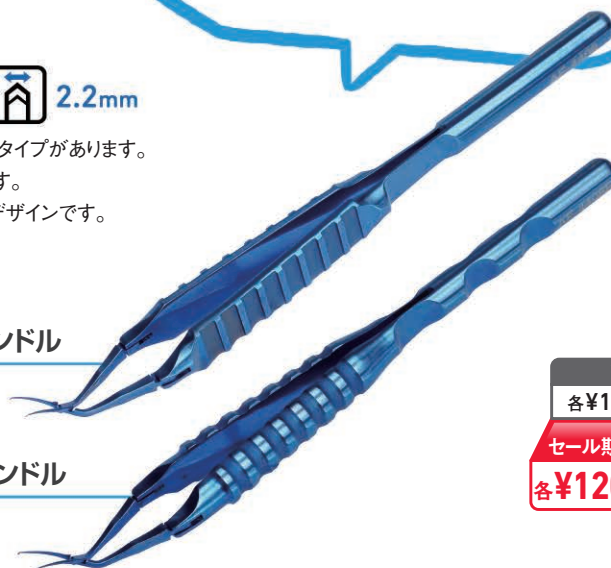


通常価格 (税込)
各¥180,000 (¥198,000)
セール期間内特別価格 (税込)
各¥120,600 (¥132,660)

AE-4407 藤田/稲村氏CCC鑷子



- 全長 100mm
- ※2.2mmの切開創に対応しています。
- ※先端の精巧な仕上げで視認性がアップしました。
- ※ヒンジ部分の改良により耐久性が増しました。

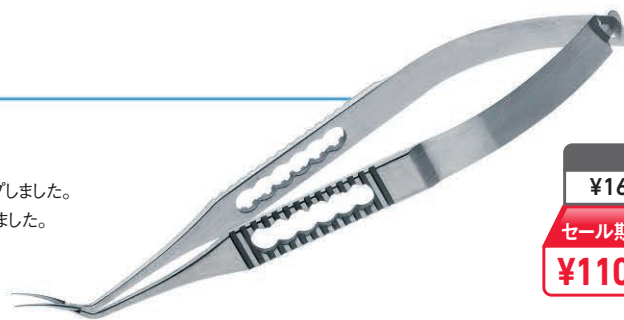

通常価格 (税込)
¥165,000 (¥181,500)
セール期間内特別価格 (税込)
¥110,550 (¥121,605)

スプリング剪刀

AE-5507 マイクロスプリング剪刀 曲鈍



- 全長121mm、ブレード幅11mm
- ※ハンドルを一回り大きくし握りやすくなりました。
- ※刃先はやや鈍を強くしています。



通常価格 (税込)
¥52,000 (¥57,200)
セール期間内特別価格 (税込)
¥34,840 (¥38,324)

AE-5508 マイクロスプリング剪刀II



- 全長110mm、ブレード幅10mm
- ※最も汎用性の高いスプリング剪刀です。



通常価格 (税込)
¥52,000 (¥57,200)
セール期間内特別価格 (税込)
¥34,840 (¥38,324)

AE-4091 縫合鑷子 直(ストロング グリップ)



■全長88mm、先端幅0.35mm、5mmプラットホーム
※プラットフォーム部分の厚みを増やしてグリップ力をさらに強化しました。
※8-0~11-0糸まで対応可能です。



縫合鑷子(無鉤)

通常価格(税込)
¥42,000(¥46,200)
セール期間内特別価格(税込)
¥28,140(¥30,954)

AE-4377 縫合鑷子 ファイン 直




■全長88mm、先端幅0.35mm、5mmプラットホーム
※手になじむワイド&ショートハンドルです。
※8-0~11-0糸まで対応可能です。



通常価格(税込)
¥42,000(¥46,200)
セール期間内特別価格(税込)
¥28,140(¥30,954)

AE-4159N ソープ氏 異物鑷子 レーザーライン付 II

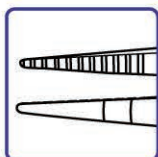


■全長111mm、先端長4mm
※先端から3mmと4mmにレーザーラインが入っています。
※硝子体注射の際に便利です。



通常価格(税込)
¥18,000(¥19,800)
セール期間内特別価格(税込)
¥12,060(¥13,266)

AE-4300 カストロビエホ氏 縫合鑷子 0.12mm鉤

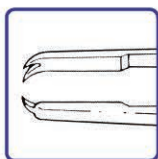


■全長108mm、直、1×2、0.12mm鉤
※スタンダードなカストロビエホ氏縫合鑷子です。



通常価格(税込)
¥85,000(¥93,500)
セール期間内特別価格(税込)
¥56,950(¥62,645)

AE-4093 角膜縫合鑷子 ピアス型(ストロング グリップ)

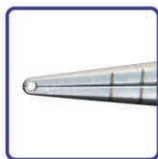

■全長88mm、直、ピアス
 ※組織へのダメージを少なくするピアス型の鑷子です。
 ※ハンドルに3つの穴が目印になります。



角膜縫合鑷子

通常価格(税込)
 ¥52,000(¥57,200)
 セール期間内特別価格(税込)
¥34,840(¥38,324)

AE-4092 角膜縫合鑷子 0.12mm鉤(ストロング グリップ)




■全長88mm、直、1×2、0.12mm鉤
 ※プラットフォーム部分の厚みを増やしてグリップ力をさらに強化しました。
 ※AE-4091と異なるハンドルデザインを採用したことで容易に見分けやすくなりました。



通常価格(税込)
 ¥60,000(¥66,000)
 セール期間内特別価格(税込)
¥40,200(¥44,220)

AE-4090 角膜縫合鑷子 0.12mm鉤

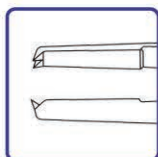

■全長88mm、直、1×2、0.12mm鉤
 ※手になじむワイド&ショートハンドルです。



通常価格(税込)
 ¥65,000(¥71,500)
 セール期間内特別価格(税込)
¥43,550(¥47,905)

AE-4036 ハームス氏 コリブリ鑷子



■全長70mm、1×2、0.12mm鉤、6mmプラットフォーム
 ※万能型多目的鑷子です。



通常価格(税込)
 ¥99,000(¥108,900)
 セール期間内特別価格(税込)
¥66,330(¥72,963)

ハイドロダイセクションカニューレ

確実な
ハイドロダイセクションで
安全な手術を!

3
売れ筋

AE-7649

三好氏 アルティメット パーチカルデュアルフローハイドロダイセクションカニューレ 25G



■25G、全長40mm

- ※2ポートから120°の間隔で上下方向に水流が出ます。
- ※一方の水流で前嚢を持ち上げ、一方で後嚢への迅速かつ容易なハイドロダイセクションを可能にします。
- ※固い核でもスムーズな操作が可能です。



通常価格 (税込)
¥42,000 (¥46,200)
セール期間内特別価格 (税込)
¥28,140 (¥30,954)

2
売れ筋

AE-7653

稲村氏 ハイドロダイセクションカニューレII 30° 25G



■25G、全長40mm

- ※2ポートから30°の間隔で水流が出るため、効果的なハイドロダイセクションが可能です。
- ※チップ先端部にサンドブラスト加工が施されています。



通常価格 (税込)
¥36,000 (¥39,600)
セール期間内特別価格 (税込)
¥24,120 (¥26,532)

1
売れ筋

AE-7639

稲村氏 ハイドロダイセクションカニューレ 25G



■25G、全長39mm

- ※先端部が扇状になっている為、水流が広がりやすくなっています。
- ※ハイドレーション時にも適しています。



通常価格 (税込)
¥30,000 (¥33,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥20,100 (¥22,110)

AE-7634

大木/吉富氏カニューレ 27G 45°



■27G、全長41mm

- ※先端はコブ状になっており、針先を確実に前嚢下へ刺入できます。



通常価格 (税込)
¥55,000 (¥60,500)
セール期間内特別価格 (税込)
¥36,850 (¥40,535)

AE-7636

赤星氏 ハイドロダイセクションカニューレII 27G



■27G、全長39mm

- ※テーパチップになっており、前嚢下への刺入が容易です。



通常価格 (税込)
¥24,000 (¥26,400)
セール期間内特別価格 (税込)
¥16,080 (¥17,688)

プレチョッパー

ASICO オリジナル
プレチョッパーシリーズです

1
売れ筋

AE-4190RE 赤星氏 コンボ II プレチョッパー

 2.0mm



■全長120mm、先端長5mm

※従来品 (AE-4284) の刃の厚みを 30% 薄くすることにより、核への刺入が容易になりました。
※ Grade I~II の核に対してプレチョップ法を実施します。



通常価格 (税込)
¥230,000 (¥253,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥154,100 (¥169,510)

AE-4189 稲村氏 スワンプレチョッパー

 2.0mm



■全長120mm、先端長5mm

※柔らかい核 (Grade I、II) であっても、その核を崩すことはありません。
※視認性を失うことなく、核を割ることができます。



通常価格 (税込)
¥230,000 (¥253,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥154,100 (¥169,510)

2
売れ筋

AE-4293 稲村氏 イーグルプレチョッパー

 2.0mm



■全長120mm、先端長5mm

※先端の鋭利な形状が、核への刺入を容易にします。
※ Grade II、III の核に対してプレチョップ法を実施します。



通常価格 (税込)
¥230,000 (¥253,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥154,100 (¥169,510)

3
売れ筋

AE-4297 稲村氏 イーグルプレチョッパーII

 2.4mm



■全長120mm、先端長5mm

※左右のチップを少しずらすことで、硬い核へアプローチが可能となりました。
※ Grade III~IV の核に対してプレチョップ法を実施します。



通常価格 (税込)
¥230,000 (¥253,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥154,100 (¥169,510)

ダイヤモンドナイフ

永続するシャープな切れ味、
それがASICO
ダイヤモンドナイフです

AE-8121 サイドポート固定ダイヤモンドナイフ

サイドポート用



■ブレード幅0.8~1mm

※0.8mm~1mm の切開幅サイドポートを作成できます。



通常価格 (税込)
¥300,000 (¥330,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥201,000 (¥221,100)

AE-8144 TEEダイヤモンドナイフ三刻刀

サイドポート用



■ブレード幅1mm

※3 方向から先端をカットしており、サイドポート作成時に抜群の切れ味が得られます。



通常価格 (税込)
¥360,000 (¥396,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥241,200 (¥265,320)

チョッパー&その他

ひと工夫されたチョッパー類は
いかがでしょう

チョッパー

AE-2575 浅見氏 チョッパー



■全長119mm、先端幅0.46mm、先端長1.27mm



※1本の器具でチョッパーとディバイダーを兼ね備えております。
※やわらかい核においても、幅0.46mmのチップ先端が核に沈みこむことはありません。
※チップ先端が内側にカーブしているため、カプセルの赤道部から核を容易に掘り起こすことができます。

通常価格 (税込)
¥70,000 (¥77,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥46,900 (¥51,590)

AE-2532 三好氏 チョッパー



■全長113mm、チップ先1.25mm



※フック先端部に45°の角度をつけているので、3時部サイドポートからの操作に適しています。

通常価格 (税込)
¥62,000 (¥68,200)
セール期間内特別価格 (税込)
¥41,540 (¥45,694)

AE-2534 稲村氏 RACEチョッパー



■全長110mm、チップ先1.35mm



※チップ下部に0.35mmのフックが設けられており、核を持ち上げ分割することで極めて硬い核に効果的です。

通常価格 (税込)
¥70,000 (¥77,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥46,900 (¥51,590)

その他

AE-2583 核ディバイディングフック



チタン

■全長115mm



※核を分割する際に使用します。

通常価格 (税込)
¥35,000 (¥38,500)
セール期間内特別価格 (税込)
¥23,450 (¥25,795)

AE-2530 赤星氏 核サスティナー



■全長115mm、先端幅0.4mm、先端長1.9mm



※グレード 2.5 以上の核処理に、カウンタープレチョップとしてご使用ください。

通常価格 (税込)
¥60,000 (¥66,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥40,200 (¥44,220)

トーリック眼内レンズ用器具

より確実な
マーキングのために……

AE-2748 宮田氏 術前角結膜マーカ―



■全長100mm



※術前に結膜と角膜へ同時にマーキングする事ができ、トポグラフィーを使用し、Axis registrationを行います。
※術中でも角膜の圧痕により基準点の確認が可能です。

通常価格 (税込)
¥80,000 (¥88,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥53,600 (¥58,960)

AE-2793S トーリックリファレンスマーカ― 術前用 片面タイプ



■全長102mm、外径15.5mm



※術前に座位の状態ですら3時、6時、9時位置にマーキングができます。
※1本で左右眼の対応ができ、3つのマーキングエッジに均等な力が加圧できるように設計されています。

通常価格 (税込)
¥110,000 (¥121,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥73,700 (¥81,070)

AE-1589 トーリックゲージ ベベル型 チタン製 スパイク無し



■全長108mm、内径12mm 外径16mm

※文字盤をすり鉢状にしたことで、顕微鏡からの反射が少なくなり、視認性が向上しました。



通常価格 (税込)
¥60,000 (¥66,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥40,200 (¥44,220)

AE-1590T トーリックゲージ ベベル型 チタン製




■全長101.5mm、内径12mm 外径16mm

※文字盤をすり鉢状にしたことで、顕微鏡からの反射が少なくなり、視認性が向上しました。

通常価格 (税込)
¥130,000 (¥143,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥87,100 (¥95,810)

AE-2740H ヌイツ氏 トーリックアクシスマーカ― 中心指標付

セットで
使用します

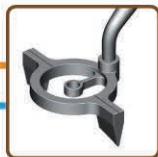

■全長103mm、外径11.2mm



※白内障手術前に、術前マーカ―にてマーキングされた3時・9時(0°-180°)ライン上に角度ゲージを置き、計算式などで決定された軸角度にマーキングをします。

通常価格 (税込)
¥130,000 (¥143,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥87,100 (¥95,810)

AE-2740N ヌイツ氏 トーリックアクシスマーカ―

セットで
使用します



■全長103mm、外径11.2mm



※シンプルなデザインのアクシスマーカ―です。

通常価格 (税込)
¥120,000 (¥132,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥80,400 (¥88,440)

バイマニュアル/A & レスキュー用器具

バイマニュアル/A



AE-7-0208 バイマニュアル灌流ハンドピース 23G 曲



■全長132mm、ポート径0.3mm×0.4mm



通常価格 (税込)
¥62,000 (¥68,200)
セール期間内特別価格 (税込)
¥41,540 (¥45,694)



AE-7-0217 バイマニュアル吸引ハンドピース 23G 曲



■全長132mm、ポート径0.3mm



通常価格 (税込)
¥62,000 (¥68,200)
セール期間内特別価格 (税込)
¥41,540 (¥45,694)



AE-7-0218 バイマニュアル吸引ハンドピース 23G 曲後囊ポリッシャー



■全長132mm、ポート径0.3mm



通常価格 (税込)
¥65,000 (¥71,500)
セール期間内特別価格 (税込)
¥43,550 (¥47,905)

レスキュー用器具

AE-5437 下分氏 IOL/核カッター セレーション付



■全長115mm、先端幅0.8mm

※アクリル IOL や核を切るためにデザインされています。
※カプセルや虹彩を傷つけるのを防ぐために、チップ先端がラウンド型にデザインされています。
※滑り止めのため、刃先にセレーション加工が施されています。



通常価格 (税込)
¥110,000 (¥121,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥73,700 (¥81,070)

AE-4907 チュー氏 レスキュー IOL 把持鑷子 21G



■全長128mm、先端幅2.86mm

※硝子体腔へ脱落した IOL を引き上げるのに有効です。
※先端がサンドブラスト加工されておりますので、眼内レンズを確実に把持できます。




通常価格 (税込)
¥420,000 (¥462,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥281,400 (¥309,540)

I/Aハンドピース & I/Aチップ

AE-7-0029 I/Aハンドピース



■全長124mm

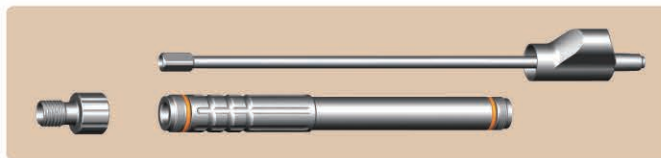

※チタン製の軽量のI/Aハンドピースです。
 ※分解して、パーツごとに洗浄することもできます。
 ※オートクレーブ・ガス滅菌どちらへも対応可能です。
 ※ねじ込み式のI/Aチップを装着可能です。
 ※I/AチップはAlcon/Nidekが取り付けられます。

通常価格(税込)
¥158,000(¥173,800)
 セール期間内特別価格(税込)
¥105,860(¥116,446)

AE-7-0027 I/Aハンドル



■全長124mm

一体型



チタン製の一体型のI/Aハンドルです。

通常価格(税込)
¥152,000(¥167,200)
 セール期間内特別価格(税込)
¥101,840(¥112,024)



2
売れ筋



22G



AE-7-3050 スリムI/Aチップ 直

2.4mm以下

■22G、0.7mmφ、ポート径0.3×0.2mm精円
 ※小切開創からの操作性が大幅に向上した22Gの新しいI/Aチップです。
 ※チップにはサンドブラスト加工が施されています。

通常価格(税込)
¥50,000(¥55,000)
 セール期間内特別価格(税込)
¥33,500(¥36,850)



1
売れ筋



22G



AE-7-3051 スリムI/Aチップ 曲

2.4mm以下

■22G、0.7mmφ、ポート径0.3×0.2mm精円
 ※小切開創からの操作性が大幅に向上した22Gの新しいI/Aチップです。
 ※チップにはサンドブラスト加工が施されています。

通常価格(税込)
¥50,000(¥55,000)
 セール期間内特別価格(税込)
¥33,500(¥36,850)



22G



AE-7-3052 スリムI/Aチップ Sカーブ

2.4mm以下

■22G、0.7mmφ、ポート径0.3×0.2mm精円
 ※前裏下研磨に最適です。
 ※小切開創からの操作性が大幅に向上した22Gの新しいI/Aチップです。
 ※チップにはサンドブラスト加工が施されています。

通常価格(税込)
¥55,000(¥60,500)
 セール期間内特別価格(税込)
¥36,850(¥40,535)



20G



AE-7-4050 I/Aチップ 直

2.4mm以下

■20G、0.9mmφ、ポート径0.3×0.2mm精円
 ※チップにはサンドブラスト加工が施されており、効果的にカプセルポリッシュを行うことができます。

通常価格(税込)
¥48,000(¥52,800)
 セール期間内特別価格(税込)
¥32,160(¥35,376)



20G



AE-7-4051 I/Aチップ 曲

2.4mm以下

■20G、0.9mmφ、ポート径0.3×0.2mm精円
 ※チップにはサンドブラスト加工が施されており、効果的にカプセルポリッシュを行うことができます。

通常価格(税込)
¥50,000(¥55,000)
 セール期間内特別価格(税込)
¥33,500(¥36,850)

結膜弛緩症鑷子 & マイボーム鑷子 & 睫毛鑷子

結膜弛緩症鑷子

AE-4368 小林氏 結膜弛緩症鑷子(焼灼法用)

AE-4368S 小林氏 結膜弛緩症鑷子(焼灼法用)スモールチップ

※金沢大学の小林顕先生ご考案の鑷子で、結膜弛緩症に対して、ハイポラベンシルを用いる焼灼法を行う際に使用します。

※先端把持部が眼球の形状に合わせてカーブしているため、弛緩した結膜を容易に把持しやすくなっています。

※結膜を切除縫合せずに手術を行える、画期的な製品です。

※細隙灯顕微鏡下でもご使用いただけるように、スモールチップタイプも登場しました。



■全長104mm、先端長9mm



■全長101mm、先端長6mm



通常価格(税込)
各¥78,000(¥85,800)
セール期間内特別価格(税込)
各¥52,260(¥57,486)

けつまくしかんしょう

小林氏 結膜弛緩症手術

googleなどで検索すると、YouTubeで動画を見ることができます。




マイボーム鑷子

AE-4521 吉富氏マイボーム腺圧迫鑷子



■全長90mm

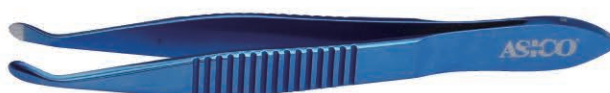

チタン

※吉富先生ご考案の鑷子で、マイボーム腺を圧迫し内容を排出させる際に使用します。

通常価格(税込)
¥50,000(¥55,000)
セール期間内特別価格(税込)
¥33,500(¥36,850)

睫毛鑷子

AE-4529 睫毛鑷子 ファインチップII(チタン製)



■全長105mm



チタン

※プラットフォーム付のファインチップで睫毛除去がより簡単になりました。
青色が特徴的なチタン製です。

通常価格(税込)
¥45,000(¥49,500)
セール期間内特別価格(税込)
¥30,150(¥33,165)

■日本代理店

 **アールイーメディカル株式会社**
R E MEDICAL, INC.

本社 : 〒540-0011
東京営業所 : 〒113-0034
名古屋営業所 : 〒465-0025
福岡営業所 : 〒812-0014

大阪市中央区農人橋2-1-29
東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東
福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

www.re-medical.co.jp